

# PHOENIX Beauty

## HIFU 3 D

### Visage et corps

High Intensity Focused Ultrasound

**Rajeunissement**  
**Réduction de la cellulite,**  
**Tension de la peau**  
**Remodelage du corps**

**Spécifications de notre HIFU 3D**



Model	PORTABLE
Ecran	15'' écran tactile couleur
Energies	0.1-2.0J/cm2
Longueur	5.0-25mm (5, 10, 15, 20, 25)
option de cartouches	8 different types: visage : 1.5, 3.0, 4.5 corpS : 6.0, 8.0, 10, 13, 16
Taille	44*30*38cm
Poids net	10KG
Tension	110V/ 220V

**Nouveautés HIFU 3 D**

La 3D se réfère au développement de la technologie dans les trois dimensions de l'innovation.

◆ Le nombre de lignes de travail

◆ Le traitement des zones et des régions est multidimensionnel: rides du visage, perte de poids et remodelage corporel

◆ Les paramètres ajustables sont multidimensionnels: la distance entre les points et les points, la distance entre les lignes et les lignes. L'énergie de chaque point, La longueur de chaque ligne, peuvent être ajustés. Le traitement est plus précis



**01 3D HIFU**  
1 tir 11 lignes (max)

**02 Les autres HIFU**  
1 tir 1 ligne

**Notre HIFU 3 D** travaille sur 1 à 11 lignes au lieu de 1 ligne une les autres HIFU ce qui permet de raccourcir les temps travail.

Ses 8 têtes permettent de traiter les différents points du corps et du visage.

## Principe de fonctionnement

Sur le corps les ultrasons focalisés (ou HIFU Ultrasons Focalisés de Haute Intensité) permettent de détruire les adipocytes. C'est une technique non chirurgicale, non invasive, sans injection et sans douleur. Elle permet de traiter à la fois les rondeurs et le relâchement cutané car le matériel utilisé agit à différents niveaux. Il permet aussi de rétracter la peau.

Sur le visage Le HIFU permet de détruire le collagène et d'activer sa régénération pour créer un maillage plus compact qui donnera un effet lifting.

La machine permet de traiter la peau à différentes profondeurs : 13 mm, 8mm, 6mm, 4.5mm, 3mm et 1,5mm, sans léser les tissus environnants.

En profondeur (13 mm, 8 mm et 6 mm) l'énergie délivrée par la machine permet de détruire les adipocytes par la chaleur (et pas seulement de les vider). Une fois détruits, ces adipocytes le sont définitivement et sont éliminés progressivement par l'organisme. Les capitons disparaissent progressivement, l'amélioration est visible également 15 jours après une séance avec un résultat optimum deux à trois mois plus tard

Lorsque la machine est réglée pour agir à des niveaux supérieurs ( visage :4 mm, 3mm et 1,5 mm) elle va pouvoir s'attaquer au relâchement cutané. Les HIFU agissent donc de l'intérieur vers l'extérieur. Les résultats commencent à être visibles 15 jours après la première séance et s'optimisent en 3 mois. La peau est plus lisse et cet effet liftant s'accroît de semaine en semaine. Il permet donc la restructuration et la réaction d'un néo-collagène, qui résout les problèmes de vieillissement en augmentant l'élasticité, le blanchiment de la peau, l'élimination des rides, le rétrécissement des pores et l'amincissement du corps.

## **. Caractéristiques de notre HIFU 3D**

1. Zone de traitement MAX pour un tir (visage et cou et corps): longueur 25 mm \* largeur 1 mm-10 mm \* profondeur 1,5 mm et 3,0 mm et 4,5 mm et 6,0 mm et 8,0 mm et 10 mm et 13 mm et 16 mm; L'utilisateur peut ajuster les paramètres selon vos exigences. **La largeur de travail est plus grande qu'avec d'autres appareils, de sorte que non seulement cela diminue beaucoup de temps fonctionnement de la machine HIFU sur les zones traitées, mais aussi rend les points d'énergie sur la peau plus uniformes et avec de meilleurs effets curatifs.**

2. Il adopte la haute technologie la plus avancée, travaillant avec précision sur différentes profondeurs de peau selon l'état de peau, grâce à ses de **huit têtes de traitement**. La puissance traverse légèrement la peau lors du traitement, et il n'y a absolument aucune blessure. Lors du traitement, la profondeur de travail de la tête de traitement sur la peau est conforme à la valeur de réglage, assurant au client tranquillité et confort.

3. Il a un effet thermique sur le collagène dermique et les fibres de collagène ainsi que des stimuli thermiques sur la couche adipeuse et SMAS, dont l'effet du traitement est stimulant pour la synthèse de nouvelles cellules.

4. Il est facile et pratique d'utilisation, et aucuns articles consommables ne sont exigés, ce qui réduit considérablement le coût de traitement.

5. L'effet de serrage et de mise en forme est évident après le traitement. Il peut être maintenu au moins 18 à 24 mois après un traitement, et contribue à ne pas dégrader l'état physique de la peau, l'opération peut se faire une fois par an voir deux selon les patients pour le visage. Pour l'amincissement le traitement peut être renouvelé tous les mois selon le patient.

6. La vie et le travail normaux ne seront pas impactés par le traitement.

Le passage des ultrasons est indolore, on peut ressentir quelques picotements.

### **Durée et nombre de séances d'HIFU nécessaires**

Pour le rajeunissement une séance est conseillée, éventuellement une deuxième 6 mois plus tard.

Une séance dure de 30 à 60 minutes, selon l'importance de la zone à traiter.

Pour le corps, si les capitons ou le relâchement cutané sont importants, on peut effectuer une deuxième séance quelques mois plus tard.


### **Les meilleures indications :**

- pour traiter le relâchement cutané du visage
- pour affiner le corps, lorsque le pli adipeux dépasse 1,5 cm sur le ventre, les cuisses ou les bras,
- pour traiter le relâchement cutané au niveau du ventre, de la face interne des cuisses ou des bras.

Ce traitement peut être proposé aussi bien aux hommes qu'aux femmes

### **Les contre-indications des ultrasons focalisés**

- En cas de grossesse.
- D'infection cutanée évolutive (herpes, dermatose inflammatoire, infection bactérienne locale)
- De Plaie ou des lésions ouvertes
- De diabète multi-complicé
- Psychose et épilepsie
- Tumeur de la peau maligne ou lésions précancéreuses
- D'hémophilie
- Après injection d'acide hyaluronique

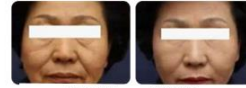

# PHOENIX *Beauty*

1100 chemin du Malvan, 06570 St Paul de Vence  
Contacts :

[www.phoenixbeauty.fr](http://www.phoenixbeauty.fr)

06 13 58 79 16

[afswilly@phoenixbeauty.fr](mailto:afswilly@phoenixbeauty.fr)